

FICHA TÉCNICA DE BATA DESECHABLE NO QUIRÚRGICA

Información del Producto

Bata diseñada para ser utilizada sobre el equipo de protección personal en ambientes no quirúrgicos.

MATERIAL Polietileno
DISEÑO Bata
COLOR Blanca
TALLA Ch-M, M-G

Dimensiones


TALLA	ANCHO (cm)	LARGO (cm)	MANGA (cm)	TOLERANCIA (cm)	ESPESOR (micras)	TOLERANCIA (%)
Ch-M	50	114	60	2.5	185	10%
M-G	60	114	60	2.5	185	10%

Atributos

- Nivel de protección 1, Clase I de acuerdo con los requerimientos FDA*
- Flexible • Impermeable • No estéril • Libre de Látex

Empaque

TIPO	CANTIDAD/PAQUETE	CANTIDAD/CAJA	IDENTIFICACIÓN
Caja (13" x 10" x 7") Largo Ancho Alto	1 Bata/bolsa	30 Bolsas	Etiqueta

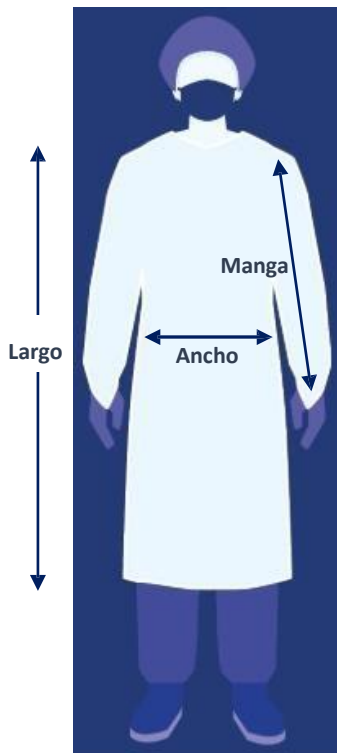

Información Adicional

Bata de protección de cuerpo frontal con agujero en el pulgar para mayor protección y espalda abierta con cobertura de hombros ofreciendo mayor comodidad.

Desechable

Fácil de usar

Eliminación segura del desecho.

Colores adicionales disponibles en pedidos mínimos de compra.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar el material de empaque a temperatura no mayor de 35°C, en un sitio ventilado, protegido de la luz solar y con envoltura

plástica para aislarla del polvo y cualquier suciedad, teniendo en cuenta estas recomendaciones el material tiene garantía de poder estar almacenado por un periodo de tiempo de hasta 12 meses sin sufrir alteraciones. Periodos de tiempo que superen 12 meses en inventario podrían ocasionar cambios en las características iniciales del producto como envejecimiento, oxidación y daños físicos del material.

Instrucciones de Uso

- Antes de colocar la bata de sobreprotección separe las mangas siguiendo la línea del pre-corte
- No usar cerca de fuentes de calor
- Realice la higiene de manos con jabón o desinfectante para manos
- Colocar su respectivo EPP



Instrucciones de equipamiento

- Introducir los brazos en cada manga.
- Colocar los pulgares en los agujeros de cada manga
- Introducir la cabeza.
- Ajustar la bata con los cinturones, ubicados a cada extremo de la bata.
- Realizar un nudo al frente o a un costado de la bata.



Instrucciones para remover bata

- Retirar cinturón.
- Tocando el interior de la bata, retirarla desde la zona de hombros y cuello y alejarla del cuerpo.
- Mientras se quita la bata, doble o enrolle la bata de adentro hacia afuera en un paquete y deséchela en el recipiente asignado para desperdicios biológicos.
- Retire el EPP y realice el proceso de sanitización de acuerdo con los procedimientos establecidos

